

Brugsvejledning

SANOHRRA noise til voksne

SANOHRRA noise til børn og voksne med små øregange

SANOHRRA noise beskytter trommehinden mod kraftig støj

Ved arbejde i hjemmet, til motorsport, til koncerter eller til koncert er der ofte mere støj, end hvad godt er for øret. SANOHRRA noise ørepropper blev udviklet til støj og glæde uden sundhedsrisici. Et specielt filterelement sørger for, at støjniveauet ved forskellige frekvenser hæmmes meget ensartet. Sådan beskyttes det følsomme sanseseorgan øret, og larm og musik kan alligevel opfattes utvilsomt. For at De kan beskytte Deres ører effektivt, har vi udviklet et specielt øreværn, som har følgende egenskaber:

- Øreværn til arbejde, sport og fest
- Ensartet støjreduktion ved alle frekvenser
- Let at sætte i og behageligt at bruge



Isætning af SANOHRRA noise

Tag en arm over hovedet og løft lidt i den øverste del af øret på den anden side af hovedet. Så uvides øregangen. Tag fat om skålen på SANOHRRA noise med den anden hånds tommel- og pegefinger og isæt den med lamellen først i øregangen med lette rotationsbevægelser. Gør ligesådan med det andet øre.

Børn må kun anvende øreværn under vejledning af voksne. Ikke egnet til børn under tre år (slugningsfarer). Spørg Deres læge i forvejen ved ørebetændelse, læsion på trommehinden eller indlagt dråbe.

Fjernelse af SANOHRRA noise

Løft let i det ydre øre som beskrevet for fjernelse. Ryk ikke øreværnet ud, men fjern det langsomt med lette rotationsbevægelser.

Advarsler for brug af SANOHRRA noise

Bemærk: Hvis brugsanvisningen og isættelsesvejledningen ikke følges kan det påvirke SANOHRRA noise beskyttelse mod støj betydeligt. Ørepropper skal bæres uden afbrudelse i støjende omgivelser.

SANOHRRA noise kan genanvendes med korrekt pleje. Produktet kan renses med mildt rengøringsmiddel (såbe). Test venligst regelmæssigt produktet for beskadigelser og erstat det eventuelt. Dette produkt kan påvirkes af visse kemiske stoffer. Ydeligene oplysninger kan indhentes hos producenten. Det anbefales at opbevare SANOHRRA noise i den medfølgende dåse efter brug. De skal stilles et koldt og tørt sted. Alle øreproppernes dele er konstrueret og produceret således, at brug ikke forårsager skader, hvis man følger brugsanvisningen.

Advarsel: Disse ørepropper fås i størrelse lille og størrelse stor. Ørepropper efter EN 352-2 tilbydes i størrelse mellem, størrelse lille og størrelse stor. Ørepropper i størrelse mellem passer størstedelen af forbrugere. Ørepropper i størrelse lille eller stor er tilkædet forbrugere, hvor ørepropper i størrelse mellem ikke passer.

Data for dæmpningseffekt

Ydæmpning: $SNR = 23\text{ dB}$, $H = 23\text{ dB}$, $M = 22\text{ dB}$, $L = 21\text{ dB}$

Frekvens [Hz]	Ydæmpning [dB]	Standard afvigelse [dB]	APV [dB]
63	23,2	3,3	19,9
125	26,2	6,0	20,2
250	23,5	4,7	18,8
500	25,5	5,4	20,1
1000	26,7	4,4	22,3

Gebruiksaanwijzing


SANOHRRA noise/music voor volwassenen

SANOHRRA noise/music til voor kinderen en volwassenen met kleine gehoorgang

SANOHRRA noise/music bescherm het trommelvlies tegen overmatig lawaai

Tijdens het klussen, bij motorsport en op feestjes en concerten is het vaak luidr, dan goed is voor het gehoor. Om toch volop zonder gezondheidsrisico's te kunnen genieten, zijn de SANOHRRA noise/music oordopjes ontwikkeld. Een speciaal filterelement zorgt ervoor dat het geluidsniveau bij verschillende frequenties zeer gelijkmatig wordt gedermt. Zo wordt het delicate gehoorzintuig beschermd en kunnen geluiden en muziek nog steeds onvervals worden waargenomen. Om uw oren effectief te beschermen hebben wij een speciale gehoorbescherming ontwikkeld die de volgende eigenschappen heeft:

- Lawaalbescherming voor werk, sport en feestjes
- Gelijmatige demping van het lawaai bij alle frequenties
- Gemakkelijk te gebruiken en comfortabel om te dragen

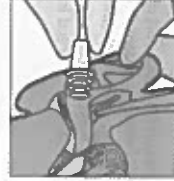

Inbrengen van SANOHRRA noise/music

Doe de arm over het hoofd en til de oorschelp aan de andere kant van het hoofd iets omhoog. Dit zal de gehoorgang vertinnen. Pak de schacht van SANOHRRA noise/music met duim en wijsvinger van de andere hand vast en breng deze met de lamellen vooraan met licht draaiende beweging in de gehoorgang in. Ga bij het andere oor precies zo te werk.

Kinderen mogen de gehoorbescherming alleen onder leiding van volwassenen gebruiken. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar (inslikkingsgevaar). Raadpleeg bij ontstekingen in het oor, verwondingen van het trommelvlies of gebruik van busjes vooral de behandelende arts.

Uithalen van SANOHRRA noise/music

Til de oorschelp zoals beschreven voor het uithalen licht op. De gehoorbescherming niet abrupt verwijderen, maar met licht draaiende beweging eruit halen.

Waarschuwingen met betrekking tot het gebruik van SANOHRRA noise/music

Let op: Het niet opvolgen van de gebruik- en inbrengstructies kan het beschermende effect van SANOHRRA noise/music tegen lawaai aanzienlijk verminderen. In lawaaiige ruimtes dienen oordopjes ononderbroken gedragen te worden.

SANOHRRA noise/music kan met de juiste verzorging opnieuw worden gebruikt. Het product kan met een mild detergent (zeep) gereinigd worden. Controleer het product regelmatig op beschadigingen en vervang het indien nodig. Dit product kan door bepaalde chemische stoffen aangetast worden. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de fabrikant. Het wordt aanbevolen om SANOHRRA noise/music na gebruik in het meegeleverde doosje te bewaren. Bewaar het doosje op een koele en droge plek. Alle onderdelen van de oordopjes zijn zo ontworpen en geproduceerd dat zij, wanneer de gebruiksaanwijzing wordt nageleefd, geen verwondingen tijdens het dragen kunnen veroorzaken.

Waarschuwing: Deze oordopjes zijn verkrijgbaar in de maten klein en groot. Oordopjes volgens EN 352-2 worden in de maten middelgroot, klein en groot aangeboden. De grote meerderheid van de gebruikers past de middelgrote oordopjes. De oordopjes van de kleine of grote categorie zijn bestemd voor gebruikers voor wie de middelgrote oordopjes niet geschikt zijn.

Gegevens van het dempende effect

Geluidsdemping: $SNR = 23\text{ dB}$, $H = 23\text{ dB}$, $M = 22\text{ dB}$, $L = 21\text{ dB}$

Frequentie [Hz]	Geluidsdemping [dB]	Standard afwijking [dB]	APV [dB]
63	23,2	3,3	19,9
125	26,2	6,0	20,2
250	23,5	4,7	18,8
500	25,5	5,4	20,1
1000	26,7	4,4	22,3

Kullanım Talimatları

Yerleşikler için SANOHRRA noise

Çocuklar ve yolları dar kulak olan yetişkinler için SANOHRRA noise

SANOHRRA noise kulak zarını yüksek ses güdütüye karşı korur

Ev içi ve dışı sporlar, motor sporları, parti veya konsertlerde genelde kulaga iyi gelimeyecek kadar güdütler oluşur. Sağık riskleri olmadan eğlence ve keyif için SANOHRRA noise kulak tıkacıları geliştirildi. Özel bir filtre öğesi farklı frekanslardaki güdütüleri karşı eği şekilde izolasyon sağlar. Bu sayede hassas duyu organı olan kulak korunur ve ses ve müzik yine de saf halde algılanır. Kulaklarımız etkili bir biçimde koruyabilmemiz için şu özelliklere sahip özel bir kulak koruması geliştirildi:

- İş, spor ve partiler için güdütü koruyucu
- Tüm frekanslarda eği ses yalıtımı
- Kolay uygulanır ve rahat taşınır



SANOHRRA noise'in takılması

Bir kolunuzu başınızın üzerinden geçirenek başın diğer tarafında bulunan kulagınıza üst kısmını tutarak hafifçe yukarı çekin. Bu sayede kulak yolu genişler. SANOHRRA noise'i diğer elin başparmak ile işaret parmağı arasında tutun ve hafif çevirime hareketiyle lameller önden girecek şekilde kulak yoluna yerleştirin. Diğer kulakta aynı yolu izleyin

Çocuklar bu kulak koruyucunu sadece yetişkinlerin gözetiminde altında kullanabilir. Üç yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir (yutma tehlikesi). Kulakla ilgili, kulak zarında lezyonlar oluşması veya tıpanosotomi tıp yerleştirilmesi durumunda bütün kullanımdan önce doktorunuza başvurunuz.

SANOHRRA noise'in çıkartılması

Çıkartmadan önce, daha önce anlatılmış olduğu gibi kulagi hafifçe kaldırın. Kulak tıkacını bir anda çıkartmayın, yavaş ve hafifçe çevirerek çıkartın.

SANOHRRA noise kullanımını için uyarılar

Dikkat: Kullanım talimatlarını dikkatle alırmaması durumunda yüksek güdütüde SANOHRRA noise'in koruma etkisi oldukça kısıtlanabilir. Kulak koruyucu tıkacılar güdütülü alanlarda analizör olarak kullanımlarıdır.

SANOHRRA noise uygun bakım halinde yeniden kullanılabilir. Temizlemek için irdin hafif temizleyici maddelerle (sabun) yıkanabilir. Lütfen dıranlı aletlerle irdinü hazırlara karşı kontrol edin ve gerekli durumdada değiştirin. Bu irdinü belirli kimyasal maddelere karşı hassasiyet gösterir. Dıranlı bilgiler irdiniden talep edilmelidir. SANOHRRA noise'in kullanımdan sonra beraberinde gelen kutucukta saklanması tavsiye edilir. Bu sırada serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Kulak koruma tıkacılarının tüm parçaları, kullanımı talimatına uygun kullanımı halinde yararlanmalar olusumayacak şekilde yapılandırılmış ve imal edilmiştir.

Uyarı: Bu kulak koruma tıkacıları küçük ve büyük boyutta sunulmuştur. EN 352-2'ye göre kulak koruma tıkacıları küçük, orta ve büyük boy olarak sunulur. Orta boyutlu kulak tıkacıları kulaklarımızı uygun şekilde koruyabilir. Küçük veya büyük kulak koruma tıkacıları ise orta boyda uygun olmayan diğer kullanıcılar için ön görülmüştür.

Yalıtım etkisi verileri

Ses yalıtımı: $SNR = 23\text{ dB}$, $H = 23\text{ dB}$, $M = 22\text{ dB}$, $L = 21\text{ dB}$

Frekvens [Hz]	Ses yalıtımı [dB]	Standard sapma [dB]	APV [dB]
63	23,2	3,3	19,9
125	26,2	6,0	20,2
250	23,5	4,7	18,8
500	25,5	5,4	20,1
1000	26,7	4,4	22,3